

เอกสารข้อมูลสำหรับผู้ใช้งาน

ผ้าก๊อชสี่เหลี่ยมแบบไม่ผ่านการฆ่าเชื้อ

888501891010875BAVV

010875BA	ผ้าก๊อชปิดแผล ขนาด 7.5 ซม. (8 ชั้น)
010810BA	ผ้าก๊อชปิดแผล ขนาด 10 ซม. (8 ชั้น)
010805BA	ผ้าก๊อชปิดแผล ขนาด 5 ซม. (8 ชั้น)
010875B12A	ผ้าก๊อชปิดแผล ขนาด 7.5 ซม. (12 ชั้น)
010810B12A	ผ้าก๊อชปิดแผล ขนาด 10 ซม. (12 ชั้น)
010805B16A	ผ้าก๊อชปิดแผล ขนาด 5 ซม. (16 ชั้น)
010875B16A	ผ้าก๊อชปิดแผล ขนาด 7.5 ซม. (16 ชั้น)
010810B16A	ผ้าก๊อชปิดแผล ขนาด 10 ซม. (16 ชั้น)
010805C16A	ผ้าก๊อชปิดแผล ขนาด 5 ซม. (16 ชั้น) (20x12)
010875C16A	ผ้าก๊อชปิดแผล ขนาด 7.5 ซม. (16 ชั้น) (20x12)
010810C16A	ผ้าก๊อชปิดแผล ขนาด 10 ซม. (16 ชั้น) (20x12)
010805B32A	ผ้าก๊อชปิดแผล ขนาด 5 ซม. (32 ชั้น)
010875B32A	ผ้าก๊อชปิดแผล ขนาด 7.5 ซม. (32 ชั้น)
010810B32A	ผ้าก๊อชปิดแผล ขนาด 10 ซม. (32 ชั้น)
010805BG8A	ผ้าก๊อชปิดแผล ขนาด 5 ซม. (8 ชั้น) (สีเขียว)
010875BG8A	ผ้าก๊อชปิดแผล ขนาด 7.5 ซม. (8 ชั้น) (สีเขียว)
010810BG8A	ผ้าก๊อชปิดแผล ขนาด 10 ซม. (8 ชั้น) (สีเขียว)
010805BG16A	ผ้าก๊อชปิดแผล ขนาด 5 ซม. (16 ชั้น) (สีเขียว)
010875BG16A	ผ้าก๊อชปิดแผล ขนาด 7.5 ซม. (16 ชั้น) (สีเขียว)
010810BG16A	ผ้าก๊อชปิดแผล ขนาด 10 ซม. (16 ชั้น) (สีเขียว)

ผ้าก๊อชสี่เหลี่ยมแบบผ่านการฆ่าเชื้อ

888501891010975BAW

010975XA	ผ้าก๊อชปิดแผลแบบผ่านการฆ่าเชื้อ ขนาด 7.5 x 7.5 ซม. (แพ็ค 5 ชั้น)
010975YA	ผ้าก๊อชปิดแผลแบบผ่านการฆ่าเชื้อ ขนาด 7.5 x 7.5 ซม. (แพ็ค 3 ชั้น)
010910BA	ผ้าก๊อชปิดแผลแบบผ่านการฆ่าเชื้อ ขนาด 10 x 10 ซม. (แพ็ค 5 ชั้น)
010975DA	ผ้าก๊อชปิดแผลแบบผ่านการฆ่าเชื้อ ขนาด 7.5 x 7.5 ซม. (แบบกล่องจ่าย - แพ็ค 5 ชั้น)
010975ZA	ผ้าก๊อชปิดแผลแบบผ่านการฆ่าเชื้อ ขนาด 7.5 ซม. (8 ชั้น) (แพ็ค 10 ชั้น)
010905B12A	ผ้าก๊อชปิดแผลแบบผ่านการฆ่าเชื้อ ขนาด 5 ซม. (12 ชั้น) (แพ็ค 5 ชั้น)
010905B16A	ผ้าก๊อชปิดแผลแบบผ่านการฆ่าเชื้อ ขนาด 5 x 5 ซม. (16 ชั้น) (แพ็ค 8 ชั้น)
010975B16A	ผ้าก๊อชปิดแผลแบบผ่านการฆ่าเชื้อ ขนาด 7.5 x 7.5 ซม. (16 ชั้น) (แพ็ค 5 ชั้น)
010975BY16A	ผ้าก๊อชปิดแผลแบบผ่านการฆ่าเชื้อ ขนาด 7.5 x 7.5 ซม. (16 ชั้น) (แพ็ค 10 ชั้น)
010910B16A	ผ้าก๊อชปิดแผลแบบผ่านการฆ่าเชื้อ ขนาด 10 ซม. (16 ชั้น) (แพ็ค 10 ชั้น)
010905B32A	ผ้าก๊อชปิดแผลแบบผ่านการฆ่าเชื้อ ขนาด 5 x 5 ซม. (32 ชั้น) (แพ็ค 10 ชั้น)
010975B32A	ผ้าก๊อชปิดแผลแบบผ่านการฆ่าเชื้อ ขนาด 7.5 x 7.5 ซม. (32 ชั้น) (แพ็ค 10 ชั้น)
010910B32A	ผ้าก๊อชปิดแผลแบบผ่านการฆ่าเชื้อ ขนาด 10 x 10 ซม. (32 ชั้น) (แพ็ค 10 ชั้น)
010975B32DA	ผ้าก๊อชปิดแผลแบบผ่านการฆ่าเชื้อ ขนาด 7.5 x 7.5 ซม. (32 ชั้น) (แบบกล่องจ่าย - แพ็ค 10 ชั้น)
010910B32DA	ผ้าก๊อชปิดแผลแบบผ่านการฆ่าเชื้อ ขนาด 10 x 10 ซม. (32 ชั้น) (แบบกล่องจ่าย - แพ็ค 10 ชั้น)

ผ้าก๊อชปิดแผลตรวจจ๊อบเอกซเรย์ได้ (ไม่ผ่านการฆ่าเชื้อ)

888501891010975BX24ANL

- 010975BX24A ผ้าก๊อชปิดแผลตรวจจ๊อบเอกซเรย์ได้ ขนาด 7.5 ซม. (24 ชั้น) แพ็ค 100 ชิ้น
010910BX32A ผ้าก๊อชปิดแผลตรวจจ๊อบเอกซเรย์ได้ ขนาด 10 ซม. (32 ชั้น) แพ็ค 100 ชิ้น

ผ้าก๊อชปิดแผลตรวจจ๊อบเอกซเรย์ได้ (ผ่านการฆ่าเชื้อ)

888501891010910BX32AHC

- 010905BXR16A ผ้าก๊อชปิดแผลผ่านการฆ่าเชื้อ ตรวจจ๊อบเอกซเรย์ได้ 5 x 5 ซม. (16 ชั้น) แพ็ค 10
010975BXR16A ผ้าก๊อชปิดแผลผ่านการฆ่าเชื้อ ตรวจจ๊อบเอกซเรย์ได้ 7.5 x 7.5 ซม. (16 ชั้น) แพ็ค 10
010910BXR16A ผ้าก๊อชปิดแผลผ่านการฆ่าเชื้อ ตรวจจ๊อบเอกซเรย์ได้ 10 x 10 ซม. (16 ชั้น) แพ็ค 10
010905BXR32A ผ้าก๊อชปิดแผลผ่านการฆ่าเชื้อ ตรวจจ๊อบเอกซเรย์ได้ 5 x 5 ซม. (32 ชั้น) แพ็ค 10
010975BXR32A ผ้าก๊อชปิดแผลผ่านการฆ่าเชื้อ ตรวจจ๊อบเอกซเรย์ได้ 7.5 x 7.5 ซม. (32 ชั้น) แพ็ค 10
010910BXR32A ผ้าก๊อชปิดแผลผ่านการฆ่าเชื้อ ตรวจจ๊อบเอกซเรย์ได้ 10 x 10 ซม. (32 ชั้น) แพ็ค 10
010910BXR325A ผ้าก๊อชปิดแผลผ่านการฆ่าเชื้อ ตรวจจ๊อบเอกซเรย์ได้ 10 x 10 ซม. (32 ชั้น) แพ็ค 5 ชิ้น

ผ้าก๊อชชนิดไม่ถักทอ (ไม่ผ่านการฆ่าเชื้อ)

888501891011805BAUR

- 011805NWA ผ้าก๊อชชนิดไม่ถักทอ ขนาด 5 x 5 ซม. (4 ชั้น) น้ำหนัก 30 กรัม
011875NWA ผ้าก๊อชชนิดไม่ถักทอ ขนาด 7.5 x 7.5 ซม. (4 ชั้น) น้ำหนัก 30 กรัม
011810NWA ผ้าก๊อชชนิดไม่ถักทอ ขนาด 10 x 10 ซม. (4 ชั้น) น้ำหนัก 30 กรัม

ผ้าก๊อชชนิดไม่ถักทอ (ผ่านการฆ่าเชื้อ)

888501891011875SAXV

- 01185NWSA ผ้าก๊อชชนิดไม่ถักทอผ่านการฆ่าเชื้อ ขนาด 5 x 5 ซม. (4 ชั้น) แพ็ค 5 ชิ้น น้ำหนัก 40 กรัม
011875NWSA ผ้าก๊อชชนิดไม่ถักทอผ่านการฆ่าเชื้อ ขนาด 7.5 x 7.5 ซม. (4 ชั้น) แพ็ค 5 ชิ้น น้ำหนัก 40 กรัม
011875NWS3A ผ้าก๊อชชนิดไม่ถักทอผ่านการฆ่าเชื้อ ขนาด 7.5 x 7.5 ซม. (4 ชั้น) แพ็ค 3 ชิ้น น้ำหนัก 40 กรัม

วัตถุประสงค์การใช้งาน

ผ้าก๊อชปิดแผลแบบธรรมดา

ผ้าก๊อชชนิดนุ่มและดูดซับได้นี้ ใช้สำหรับแผลที่มีเลือดออกและ/หรือมีของเหลวซึม และใช้ทำความสะอาดบริเวณแผลก่อนการปิดแผล

ผ้าก๊อชตรวจจ๊อบเอกซเรย์ได้

ผ้าก๊อชแบบผ่านการฆ่าเชื้อที่ตรวจจ๊อบเอกซเรย์ได้ มีวัตถุประสงค์สำหรับใช้ในระหว่างผ่าตัด เพื่อใช้แยกอวัยวะหรือโครงสร้าง และดูดซับเลือดจากบริเวณที่ทำการผ่าตัด

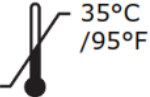
คำเตือน

สำหรับใช้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น

วิธีการใช้งาน

นำผ้าก๊อชออกจากบรรจุภัณฑ์โดยใช้เทคนิคแบบผ่านการฆ่าเชื้อ โดยปกติจะใช้เข็มหนีบ จับผ้าก๊อชในน้ำเกลือให้ชุ่ม จากนั้นใช้เข็มหนีบทำความสะอาดบริเวณ แผลด้วยผ้าก๊อชที่ชุ่มน้ำเกลือ แนะนำให้เช็ดในทิศทางเดียวแล้วทิ้ง จากนั้นทำความสะอาดบริเวณอื่น ๆ ด้วยผ้าก๊อชที่สะอาดและชุ่มน้ำเกลือใหม่ โดยใช้เทคนิคการใช้ครั้งเดียวและทิ้งทันที เพื่อลดความเสี่ยงในการปนเปื้อนข้ามบริเวณแผล

คำอธิบายสัญลักษณ์

	ผลิตภัณฑ์ที่จัดส่งเป็นแบบปลอดเชื้อ		เครื่องมือแพทย์
	ห้ามใช้หากบรรจุภัณฑ์ชำรุด		คำเตือนและข้อควรระวัง กรุณาศึกษาคู่มือการใช้งาน
	กรุณาอย่าใช้ซ้ำ		กรุณาศึกษาคู่มือก่อนการใช้งาน
	เก็บให้ห่างจากแสงแดด		ไม่มีส่วนประกอบของน้ำยางธรรมชาติ
	เก็บในที่แห้ง		กรุณาเก็บในที่อุณหภูมิต่ำกว่า 35 องศาเซลเซียส หรือ ต่ำกว่า 95 องศาฟาเรนไฮต์
	ผลิตภัณฑ์อยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่เป็นระบบปิด ฉนีกปลอดเชื้อเพียงชั้นเดียว		