

Hydrocolloid Dressing

Description

This Hydrocolloid Dressing contains carboxy-methylcellulose (CMC) which absorbs wound fluid and forms a gel to provide an optimal condition for wound healing. It is a top film that is bacteria-proof and waterproof.

Application of dressing

1. Wash hands before applying the dressing.
2. Clean and dry the wound and surrounding skin gently. Ensure no cream, ointment or similar product is on the skin.
3. Remove dressing from pouch.
4. Apply the dressing so that the sticky side sits directly over the wound.

When the product absorbs wound exudate, a white gel is formed and the appearance of the product will become white. The product should be changed when clinically indicated, when visible signs of exudate approach the edge of the product or after 7 days.

Removing the dressing:

5. Gently lift the corners of the product and remove it from the wound. Soaking the dressing with saline water where the wound is in contact can assist with removal.

Precautions for use

Seek medical advice immediately for all serious wounds and burns or if you experience redness or discomfort near the wound. A health care professional should frequently inspect and manage infected wounds, diabetic wounds and wounds which are solely or partially caused by arterial insufficiency, in accordance with local guidelines.

Dressing is sterile unless the individual pouch is opened or damaged. Do not use the dressing if the pouch is open or damaged. Single-use. Reuse of this single use product may create a potential risk to the user. Store in a cool, dry place (<35 degrees Celsius).

Intended Use

The intended purpose of our dressing is to provide an optimal condition for wound healing and create a barrier to protect wounds from bacterial and pathogens. Designed for dry to low exuding wounds. This is not intended to be a primary dressing used on chronic wounds for wounds involving the dermis.


Do not use

Re-use of the single use product may create a potential harm to the user. Reprocessing, washing, disinfection and/or sterilization may compromise product characteristics, causing additional risk of physical harm or infection to the user.

bpositive accepts no liability for any injury or loss that may arise if this product is used in a manner contrary to bpositive's current recommendations.

Basic UDI-DI 888501891021910BAV3

bpositive

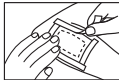

Manufacturer:
BPositive Pte Ltd
www.bpositivehealthcare.com

Importer:
BPositive Pte Ltd
Singapore Business Federation Centre
160 Robinson Road, #14-04,
068914 Singapore

BPositive Healthcare Pty Ltd
Suite 18, 11 Wilson Street, South Yarra VIC,
3141 Australia

Local Authorised Representative:
T T MEDICAL MANAGEMENT SDN. BHD.
A-3A-03 EkoCheras, No:693, Batu 5 Jalan
Cheras, 56000 Kuala Lumpur, Malaysia
TL : +603 9134 5391



แผ่นปิดแผลไฮโดรคอลลอยด์

คำอธิบาย

แผ่นปิดแผลไฮโดรคอลลอยด์นี้ประกอบด้วยคาร์บอนกัมมันต์เซลลูโลส (CMC) ซึ่งมีคุณสมบัติในการดูดซับของเหลวจากบาดแผลและเปลี่ยนเป็นเจล เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับการสมานแผล ทั้งนี้ แผ่นปิดแผลยังมีชั้นฟิล์มด้านบนที่สามารถป้องกันการปนเปื้อนจากแบคทีเรียและกันน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วิธีการใช้

1. ล้างมือให้เรียบร้อยก่อนใช้พลาสเตอร์ปิดแผล
2. ทำความสะอาดและเช็ดแผลและผิวหนังโดยรอบอย่างอ่อนโยน
3. หยิบพลาสเตอร์ปิดแผลออกจากถุง
4. ใช้ตัวปิดแผลโดยให้ด้านที่เป็นมันเงาอยู่เหนือแผลโดยตรง

เมื่อผลิตภัณฑ์ดูดซับของเหลวจากแผล จะเกิดเจลสีขาวขึ้น และลักษณะของผลิตภัณฑ์จะเปลี่ยนเป็นสีขาว ควรเปลี่ยนผลิตภัณฑ์เมื่อมีของเหลวจากแผลหรือมีสัญญาณที่บ่งชี้ว่าผลิตภัณฑ์ใกล้จะหมดอายุ หรือเมื่อสังเกตเห็นว่าของเหลวจากแผลซึมเข้ามาใกล้ถึงขอบของผลิตภัณฑ์ หรือเมื่อใช้งานครบ 7 วัน

วิธีการลอกพลาสเตอร์ปิดแผลออก

5. พลาสเตอร์ปิดแผลสามารถลอกออกได้ง่ายๆ หากลองดึงหรือแงะแผลเริ่มแห้ง ให้ใช้น้ำเกลือหรือพลาสเตอร์ปิดแผลให้เปียกบริเวณที่แผลติด จะช่วยทำให้ลอกพลาสเตอร์ออกได้ง่ายขึ้น

ข้อควรระวังในการใช้งาน

หากบาดแผลเป็นบาดแผลที่ร้ายแรงหรือมีรอยไหม้ หรือหลังจากใช้พลาสเตอร์ปิดแผล พบว่าผิวหนังมีรอยระคายเคืองใดๆ พลาสเตอร์ปิดแผลหรือผิวหนังมีสัญญาณใดๆ ไม่สบายตัว ควรพบแพทย์ทันที

ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์อาจแตกต่างกันไปหากใช้กับบริเวณผิวหนัง

พลาสเตอร์ปิดแผลได้รับการทำหลายครั้งและการทำซ้ำอาจทำให้ผิวหนังอักเสบได้ หากใช้พลาสเตอร์ปิดแผลติดต่อกันนานเกินไป อาจทำให้เกิดการระคายเคืองหรือผิวหนังอักเสบได้ ห้ามใช้พลาสเตอร์ปิดแผลติดต่อกันหากพบว่าถูกผิวหนังหรือผิวหนังแดง คัน หรือมีอาการคัน (<35 องศาเซลเซียส)

วัตถุประสงค์การใช้งาน

แผ่นปิดแผลนี้ออกแบบมาเพื่อช่วยให้อาการบาดเจ็บและป้องกันการติดเชื้อ โดยจะสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการรักษาแผล สามารถใช้กับแผลที่มีการซึมซับของเหลวเล็กน้อยถึงปานกลาง เช่น แผลจากการผ่าตัด แผลไหม้ แผลจากการกัด หรือแผลที่มีหนองหรือฝี นอกจากนี้ยังสามารถใช้เพื่อปิดแผลที่แห้งแล้ว โดยร่างกายจะจัดจางไปเอง

คำเตือน


ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ซ้ำ เพราะอาจทำให้เกิดอันตรายได้ การทำซ้ำอาจทำให้เกิดการอักเสบหรือผิวหนังอักเสบได้ และอาจทำให้เกิดการติดเชื้อหรือผิวหนังอักเสบได้ แผ่นปิดแผลไฮโดรคอลลอยด์ไม่เหมาะสำหรับแผลที่มีการซึมซับของเหลวมาก แผลลึกหรือมีการติดเชื้อ แผลที่มีการเปิดของเนื้อเยื่อหรือแผลที่มีผิวหนังรอบๆ ที่บวม

หมายเหตุ

BPositive จะรับผิดชอบหากผลิตภัณฑ์ถูกใช้ผิดวิธี หรือใช้ตามคำแนะนำที่ผิด

Basic UDI-DI 888501891021910BAV3

bpositive

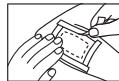

หน้าจำหน่าย

บริษัทเบรสมิเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
เลขที่ 1678/1 อาคารพลา 19 ถนน พหลโยธิน
แขวงจตุจักร กรุงเทพมหานคร
02 038 8129





Label identification :

	รหัสล็อตสินค้า		ผลิตภัณฑ์จัดจำหน่ายในสภาพผ่านการฆ่าเชื้อทางการแพทย์
	คำเตือนและข้อควรระวัง กรุณาศึกษาคู่มือการใช้งาน		กรุณาอย่าใช้ซ้ำ
	เครื่องมือแพทย์		ผู้ผลิต

แก้ไขล่าสุด: กันยายน 2024



BPOSITIVE PTE LTD,
Singapore Business Federation Centre,
160 Robinson Road, #14-04, 068914 Singapore

(+65 3135 1111)
hello@bpositivehealthcare.com

