

Secure Wound Closure Strips

Intended Use

The intended use of this product is to help lacerations and surgical incisions heal by bringing the edges of the wound together to close. Our product may be used in conjunction with skin sutures and staples. For best results, apply a waterproof dressing over the closure strips to protect your wound from water and bacteria. Do consult your healthcare professional for further instructions to successfully heal your wound or incision and reduce scarring

Contraindications:

1. Where adhesion cannot be obtained. Potential causes of inadequate adhesion are presence of exudate, skin oils, moisture, or hair.
2. Infected wounds
3. Where the edges of the wound cannot be easily brought together so they are joined with fingers or forceps.

Warnings:

1. The development of postoperative oedema may cause skin shearing, skin blistering, which can impact tape adhesion and therefore ability to secure the skin in place
2. Application of an additional wound dressing over the strips may result in skin stripping upon removal.
3. As with all adhesive products applied to the skin, a small percentage of individuals may experience skin irritation, hypopigmentation or hyperpigmentation following removal.

Precautions:

1. The skin should be clean, dry, and free of skin oils to assure good adhesion.
2. Do not apply skin closures under tension. Skin shearing, skin blistering, or loss of adhesion may result if excessive tension is applied.

Directions for Use:

1. Clean and dry skin. If desired, a thin layer of Compound Benzoin Tincture may be applied to enhance strip adhesion.



2. Open package. Remove card and card end tab.



3. Grasp end of strip and lift strip straight upward from card.



4. When using as a skin closure device, without presence of skin suture or staple, appose skin edges using fingers or forceps. Place strips across wound, ensuring tensionless application.



5. Section larger wounds to distribute tension. Space strips approximately 1/8 inch (3 mm) apart.



6. Additional closures may be applied parallel to the wound and approximately 1/2 inch (12 mm) from closure ends. This may reduce shear force beneath the strip ends.



Other Information

1. Supplied in individually packaged cards of sterile skin closures.
2. Store at room temperature. Avoid excessive heat or humidity.
3. Sterile unless envelope is damaged or opened.

 **Manufacturer:**
BPositive Pte Ltd
www.bpositivehealthcare.com

Importer:
BPositive Pte Ltd
Singapore Business Federation Centre 160 Robinson Road,
#14-04, 068914 Singapore

BPositive Healthcare Pty Ltd
Suite 18, 11 Wilson Street, South Yarra VIC, 3141 Australia

Local Authorised Representative:
T T MEDICAL MANAGEMENT SDN. BHD.
A-3A-03 EkoCheras, No:693, Batu 5 Jalan Cheras, 56000
Kuala Lumpur, Malaysia
Tel: +603 9134 5391



bpositive

แถบปิดแผล

bpositive

คำอธิบาย

ผลิตภัณฑ์นี้ออกแบบมาเพื่อช่วยให้แผลลึกและแผลผ่าตัดสมานตัว โดยการดึงขอบแผลเข้าหากัน สามารถใช้ร่วมกับไหมเย็บแผลหรือลวดเย็บได้ เพื่อให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ควรใช้ผ้าปิดแผลกับน้ำคลุมกับแถบปิดแผลนี้ เพื่อป้องกันแผลจากน้ำและแบคทีเรีย และควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ เพื่อคำแนะนำเพิ่มเติมในการรักษาแผลให้ปลอดภัย

ข้อห้ามใช้

1. ไม่ควรใช้บนบริเวณที่ไม่สามารถทำให้แถบปิดแผลติดได้ เช่น มีของเหลวออกจากแผล ผิวมัน มีผิวขื่น หรือมีขน
2. ไม่ควรใช้กับแผลติดเชื้อ
3. ไม่ควรใช้ในกรณีที่ขอบแผลไม่สามารถดึงเข้ามาชิดกันได้ โดยใช้มีดหรืออุปกรณ์ช่วย

คำเตือน

1. หลีกเลี่ยงการผ่าตัด อาจเกิดอาการบวมที่ทำให้ผิวหนังลอกหรือเกิดแผลพุพอง ซึ่งอาจส่งผลต่อการติดแน่นของแถบปิดแผล
2. การใช้แผ่นปิดแผลหลายชั้นทับบนแถบอาจทำให้ผิวหนังหลุดลอกเมื่อถอดออก
3. ผู้ใช้บางรายอาจมีอาการระคายเคือง สิวเปลี่ยนแปลง หรือเกิดอาการแพ้เมื่อถอดแถบออก

วิธีใช้

1. เช็ดทำความสะอาดผิวให้แห้ง เพื่อเพิ่มการยึดเกาะ.
2. ลอกแผ่นฟิล์มออก.
3. ดึงปลายแถบขึ้นตรงจากแผ่นปิดแผล.
4. หนีบปิดแผล ห้ามปิดแผลตึงเกินไป ควรใช้นิ้วกดเบาๆ ให้แผ่นปิดแผลแนบสนิท.
5. หากแผลยาวควรเว้นระยะห่างแผ่นปิดแผล ประมาณ 3 มม.
6. การปิดแผลเพิ่มเติม ติดแนววงวง เพื่อลดแรงดึง และควรเว้นประมาณ 12 มม.



ข้อมูลเพิ่มเติม

1. ผลิตภัณฑ์บรรจุแยกชิ้น และ ผ่านการฆ่าเชื้อ
2. ควรเก็บในอุณหภูมิห้อง และ หลีกเลี่ยงความร้อน และ ความชื้น
3. ห้ามใช้หากซองเสียหาย หรือ ถูกเปิด

นำเข้าโดย

บริษัทเมอร์สเมดิค (ไทยแลนด์) จำกัด
เลขที่ 1678/1 อาคารพลพ 19 ถนน พหลโยธิน
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
02 038 8129





เอกสารข้อมูลสำหรับผู้ใช้งาน

บีโพซิทีฟ แอปปิดแผล

วัตถุประสงค์การใช้งาน: ผลิตภัณฑ์นี้ออกแบบมาเพื่อช่วยให้บาดแผลที่เกิดจากการบาดเจ็บและการผ่าตัดสมานตัว โดยการดึงขอบแผลให้ปิดเข้าหากัน ผลิตภัณฑ์ของเราสามารถใช้ร่วมกับไหมเย็บแผลและลวดเย็บผิวหนังได้ เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุดควรปิดทับแอปปิดแผลด้วยแผ่นปิดแผลกันน้ำเพื่อปกป้องแผลจากน้ำและแบคทีเรีย กรุณาปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพเพื่อรับคำแนะนำเพิ่มเติมในการดูแลบาดแผลหรือแผลผ่าตัดอย่างถูกวิธีและเพื่อลดรอยแผลเป็น

รายละเอียด: แอปปิดแผลผลิตจากผ้าไม่ถักทอ เสริมความแข็งแรงด้วยเส้นใยเคลือบกาวยอะคริลิก เป็นทางเลือกที่ดีและมีประสิทธิภาพในการลดรอยแผลเป็น

คำเตือน:

1. การเกิดอาการบวมขึ้นหลังการผ่าตัดอาจทำให้เกิดการเสียดสีของผิวหนังหรือการเกิดตุ่มพองบนผิวหนัง ซึ่งอาจส่งผลต่อการยึดติดของแอปปิดแผลและความสามารถในการยึดผนังให้อยู่กับที่
2. การใช้แผ่นปิดแผลเพิ่มเติมทับบนแอปปิดแผล อาจทำให้ผิวหนังหลุดลอกเมื่อถอดออก
3. เช่นเดียวกับผลิตภัณฑ์กาวยทุกชนิดที่ใช้กับผิวหนัง อาจมีบางรายที่เกิดการระคายเคืองผิวหนัง การเกิดภาวะผิวหนังซีด (Hypopigmentation) หรือ ผิวหนังคล้ำ (Hyperpigmentation) หลังการถอดแผ่นกาวย

บีโพซิทีฟ แอปปิดแผล		UDI: 888501891022206BATS
รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า	ขนาดบรรจุ
022203BA	บีโพซิทีฟ แอปปิดแผล ขนาด 3 x 75 มม.	50 ชิ้นต่อกล่อง
022206BA	บีโพซิทีฟ แอปปิดแผล ขนาด 6 x 38 มม.	50 ชิ้นต่อกล่อง
022206BZ	บีโพซิทีฟ แอปปิดแผล ขนาด 6 x 75 มม.	50 ชิ้นต่อกล่อง
022212BA	บีโพซิทีฟ แอปปิดแผล ขนาด 12 x 100 มม.	50 ชิ้นต่อกล่อง
022206RA	บีโพซิทีฟ แอปปิดแผล ขนาด 6 x 38 มม.	24 ชิ้นต่อกล่อง

วิธีการใช้งาน:

1. ทำความสะอาดและเช็ดผิวหนังให้แห้ง หากต้องการ สามารถทายา ทิงเจอร์เบนซอยน์ (Compound Benzoin Tincture) บาง ๆ เพื่อช่วยเพิ่มการยึดติดของแอปปิดแผลได้
2. เปิดบรรจุภัณฑ์นำการ์ดและแอปปลายการ์ดออก จับปลายแอปปิดแผลและดึงขึ้นในแนวตรงจากการ์ด
3. หากไม่มีการใช้ไหมเย็บ หรือ หมุดเย็บแผล ให้เลื่อนขอบผิวหนังเข้ามาชิดกันโดยใช้นิ้วมือหรือคีมหนีบ จากนั้นวางแอปปิดแผลขวางบริเวณแผล โดยต้องมั่นใจว่าการติดนั้นไม่ตึงรั้งหรือทำให้ผิวหนังตึงเกินไป
4. สำหรับแผลขนาดใหญ่ ให้แบ่งเป็นส่วน ๆ เพื่อกระจายแรงดึง โดยเว้นระยะห่างระหว่างแอปประมาณ 1/8 นิ้ว (3 มม.)
5. สามารถติดแอปปิดแผลเพิ่มเติมในแนวขนานกับแผล โดยเว้นระยะประมาณ 1/2 นิ้ว (12 มม.) จากปลายแอปเดิม เพื่อช่วยลดแรงเสียดทานบริเวณปลายแอป

การเก็บรักษาและการขนส่ง: เก็บไว้ในที่เย็นและแห้ง ที่อุณหภูมิห้อง (ต่ำกว่า 35 องศาเซลเซียส) หลีกเลี่ยงความชื้นที่มากเกินไป

อายุการเก็บรักษา: 3 ปี กรุณาตรวจสอบวันผลิตและวันหมดอายุบนบรรจุภัณฑ์

UDI: 888501891022206BATS



BPOSITIVE PTE LTD,
Singapore Business Federation Centre,
160 Robinson Road, #14-04, 068914 Singapore

(+65 3135 1111)
hello@bpositivehealthcare.com



ผู้ผลิต:

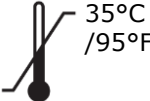
บริษัท บีโพซิทีฟ ฟิทีอี จำกัด

ที่อยู่: ศูนย์สหพันธ์ธุรกิจสิงคโปร์ (Singapore Business Federation Centre) 160 ถนนโรบินสัน ชั้น 14 หอ 04 ประเทศสิงคโปร์ 068914

โทร: +65 6883 0688

อีเมล: sales@bpositivehealthcare.com

การระบุฉลากสินค้า:

	ผลิตภัณฑ์ที่จัดส่งเป็นแบบปลอดเชื้อ		เครื่องมือแพทย์
	ห้ามใช้หากบรรจุภัณฑ์ชำรุด		คำเตือนและข้อควรระวัง กรุณาศึกษาคู่มือการใช้งาน
	กรุณาอย่าใช้ซ้ำ		กรุณาศึกษาคู่มือก่อนการใช้งาน
	เก็บให้ห่างจากแสงแดด		ไม่มีส่วนประกอบของน้ำยางธรรมชาติ
	เก็บในที่แห้ง		กรุณาเก็บในที่อุณหภูมิต่ำกว่า 35 องศาเซลเซียส หรือ ต่ำกว่า 95 องศาฟาเรนไฮต์
	ผลิตภัณฑ์อยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่เป็นระบบปิด ผนึกปลอดเชื้อเพียงชั้นเดียว		

แก้ไขครั้งที่ 2: กันยายน 2025



BPOSITIVE PTE LTD,
Singapore Business Federation Centre,
160 Robinson Road, #14-04, 068914 Singapore

(+65 3135 1111)
hello@bpositivehealthcare.com

